


CHIRURGIA GUIDATA



KIT DI CHIRURGIA GUIDATA

<i>cod</i>	<i>descrizione</i>
BP	bone profile chirurgia guidata
GD202406	fresa ø 2,0/2,4 x 6 mm
GD202408	fresa ø 2,0/2,4 x 8 mm
GD202410	fresa ø 2,0/2,4 x 10 mm
GD202411	fresa ø 2,0/2,4 x 11 mm
GD202413	fresa ø 2,0/2,4 x 13 mm
GD202416	fresa ø 2,0/2,4 x 16 mm
GD242806	fresa ø 2,4/2,8 x 6 mm
GD242808	fresa ø 2,4/2,8 x 8 mm
GD242810	fresa ø 2,4/2,8 x 10 mm
GD242811	fresa ø 2,4/2,8 x 11,5 mm
GD242813	fresa ø 2,4/2,8 x 13 mm
GD242816	fresa ø 2,4/2,8 x 16 mm
GD283306	fresa ø 2,8/3,3 x 6 mm
GD283308	fresa ø 2,8/3,3 x 8 mm
GD283310	fresa ø 2,8/3,3 x 10 mm
GD283311	fresa ø 2,8/3,3 x 11,5 mm
GD283313	fresa ø 2,8/3,3 x 13 mm
GD283316	fresa ø 2,8/3,3 x 16 mm
GD333806	fresa ø 3,3/3,8 x 6 mm
GD333808	fresa ø 3,3/3,8 x 8 mm
GD333810	fresa ø 3,3/3,8 x 10 mm
GD333811	fresa ø 3,3/3,8 x 11,5 mm
GD333813	fresa ø 3,3/3,8 x 13 mm
GD333816	fresa ø 3,3/3,8 x 16 mm
GD384406	fresa ø 3,8/4,4 x 6 mm
GD384408	fresa ø 3,8/4,4 x 8 mm
GD384410	fresa ø 3,8/4,4 x 10 mm
GD384411	fresa ø 3,8/4,4 x 11,5 mm
GD384413	fresa ø 3,8/4,4 x 13 mm
GD384416	fresa ø 3,8/4,4 x 16 mm
GDCSD33	fresa svasatrice ø 3,3
GDCSD37	fresa svasatrice ø 3,7
GDCSD41	fresa svasatrice ø 4,1
GDCSD47	fresa svasatrice ø 4,7
GDTAPS1B37	maschiatore S1B ø 3,7
GDTAPS1B41	maschiatore S1B ø 4,1
GDTAPS1B47	maschiatore S1B ø 4,7
GDTAPIMAX33	maschiatore iMAX ø 3,3
GDTAPIMAX37	maschiatore iMAX ø 3,7
GDTAPIMAX41	maschiatore iMAX ø 4,1
GDTAPIMAX47	maschiatore iMAX ø 4,7
PING15 (3 psc)	pin per guidata ø 1,5
HDH25S	connettore esagono interno 2,5 corto
MDL	cacciavite esagonale 1,25 h. 29
FR15L	fresa D15
CS	mucotomo chirurgia guidata
TRT	estrattore monconi
GD444806	fresa ø 4,4/4,8 x 6 mm
GD444808	fresa ø 4,4/4,8 x 8 mm
TWA4	cricchetto completo

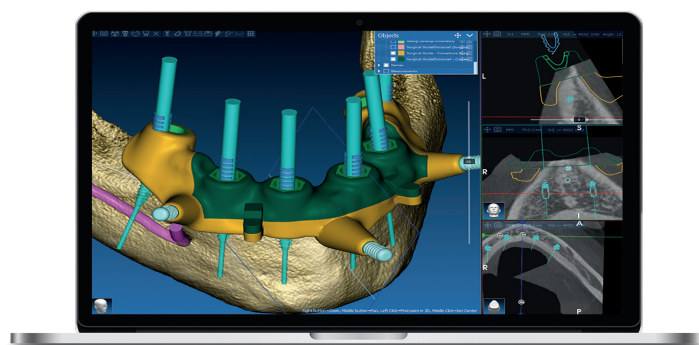

LIBRERIE IMPLANTARI PER LA CHIRURGIA GUIDATA

iRES mette **gratuitamente a disposizione** dei suoi clienti **un kit di librerie implantari per la progettazione degli interventi in chirurgia guidata.**

Tutti gli impianti iRes sono presenti in IESS Guide, il software diagnostico e di chirurgia guidata proposto da **IESS Group** su base **Real Guide**, in grado di rielaborare accuratamente i dati anatomici del paziente e facilitare la definizione del piano di trattamento ideale.

Completo e versatile, grazie all'ampia libreria implantare, il posizionamento dell'impianto può essere pianificato tenendo in considerazione, oltre alle caratteristiche anatomiche del sito, anche gli aspetti protesici, al fine di ottenere una riabilitazione funzionale ed estetica.

Le librerie implantari iRES sono disponibili sul sito <https://it.ires.dental/media-kit/> per i seguenti software:

IESS Guide (RealGuide)

Exocad

BlueSky Bio

3Shape Implant Studio

Su richiesta, possono essere realizzate le librerie anche per altri software.

PIN Ø 1,5

Materiale: Ti-6Al-4V



cod

PING15

FRESA Ø 1,5

Materiale: Acciaio chirurgico



cod

FR15L

FRESE Ø 2,0/2,4

Materiale: Acciaio chirurgico

h.	cod
6	GD202406
8	GD202408
10	GD202410
11	GD202411
13	GD202413
16	GD202416

**FRESE Ø 2,4/2,8**

Materiale: Acciaio chirurgico

h.	cod
6	GD242806
8	GD242808
10	GD242810
11	GD242811
13	GD242813
16	GD242816

**FRESE Ø 2,8/3,3**

Materiale: Acciaio chirurgico

h.	cod
6	GD283306
8	GD283308
10	GD283310
11	GD283311
13	GD283313
16	GD283316

**FRESE Ø 3,3/3,8**

Materiale: Acciaio chirurgico

h.	cod
6	GD333806
8	GD333808
10	GD333810
11	GD333811
13	GD333813
16	GD333816

**FRESE Ø 3,8/4,4**

Materiale: Acciaio chirurgico

h.	cod
6	GD384406
8	GD384408
10	GD384410
11	GD384411
13	GD384413
16	GD384416

**FRESE Ø 4,4/4,8**

Materiale: Acciaio chirurgico

h.	cod
6	GD444806
8	GD444808

**FRESA SVASATRICE**

Materiale: Acciaio chirurgico



Ø	cod
3,3	GDCSD33



Ø	cod
3,7	GDCSD37



Ø	cod
4,1	GDCSD41



Ø	cod
4,7	GDCSD47

MASCHIATORE IMAX

Materiale: Acciaio chirurgico



Ø	cod
3,3	GDTAPIMAX33



Ø	cod
3,7	GDTAPIMAX37



Ø	cod
4,1	GDTAPIMAX41



Ø	cod
4,7	GDTAPIMAX47

MASCHIATORE CHIRURGICO S1B

Materiale: Acciaio chirurgico



Ø	cod
3,7	GDTAPS1B37



Ø	cod
4,1	GDTAPS1B41



Ø	cod
4,7	GDTAPS1B47

BONE PROFILE

Materiale: Acciaio chirurgico



cod
BP

MUCOTOMO

Materiale: Acciaio chirurgico



cod
CS

MOUNTER

Materiale: Ti-6Al-4V • Vite inclusa: S1BRS1



cod
BL S1B1GSM
Esagono interno 2,5



cod
NBL S1BN1GSM
Esagono interno 2,1



cod
NHSIC NARROW NHSICN1GSM
Connessione conometrica da 2,1



cod
EH S1EH1GSM
Esagono esterno 2,7
Vite inclusa: S1EHR51



cod
EH 3.3 S1EHN1GSM
Esagono esterno 2,4
Vite inclusa: S1EHR51



cod
IMAX MUA DRITTO NHSMGSM
Vite inclusa: NHSMR51

Materiale: Ti-6Al-4V

BOCCOLA



cod
BPG15

Per pin
Materiale: Ti-6Al-4V



cod
BG001

Ø 6,2
Materiale: PEEK



cod
BG002


Materiale: Ti-6Al-4V

CONNETTORI

Materiale: Acciaio chirurgico

Ø	h.	cod
2,5	25	HDH25S
2,5	30	HDH25L

Connettori per esagono interno Regular

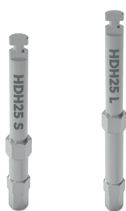

CACCIAVITI PROTESICI

Materiale: Acciaio chirurgico

	code
extra corto	MDXS
corto	MDS
lungo	MDL
extra lungo	MDXL

Cacciavite manuale
per esagono 1,25 mm



ESTRATTORI

Materiale: Acciaio chirurgico

cod
TRT

Per monconi



CRICCHETTO

Materiale: Acciaio chirurgico

cod
TW4

Senza adattatore



cod
TWA4

Completo



SEQUENZA FRESE

IMPIANTI Ø 3,3

D1	D2-D3	D4		altezza impianto (mm)					
				6	8	10	11,5	13	16
			mucotomo CS	•	•	•	•	•	•
			bone profile BP	•	•	•	•	•	•
			fresa ø 2,0/2,4 L.6	•	•	•	•	•	•
			fresa ø 2,0/2,4 L.8		•	•	•	•	•
			fresa ø 2,0/2,4 L.10			•	•	•	•
			fresa ø 2,0/2,4 L.11,5				•	•	•
			fresa ø 2,0/2,4 L.13					•	•
			fresa ø 2,0/2,4 L.16						•
			fresa ø 2,4/2,8 L.6	•					
			fresa ø 2,4/2,8 L.8		•	•	•	•	•
			fresa ø 2,4/2,8 L.10			•			
			fresa ø 2,4/2,8 L.11,5				•		
			fresa ø 2,4/2,8 L.13					•	•
			fresa ø 2,4/2,8 L.16						•
			countersink ø 3,3	•	•	•	•	•	•
			maschiatore ø 3,3	•	•	•	•	•	•

IMPIANTI Ø 3,7

D1	D2-D3	D4		altezza impianto (mm)					
				6	8	10	11,5	13	16
			mucotomo CS	•	•	•	•	•	•
			bone profile BP	•	•	•	•	•	•
			fresa ø 2,0/2,4 L.6	•	•	•	•	•	•
			fresa ø 2,0/2,4 L.8		•	•	•	•	•
			fresa ø 2,0/2,4 L.10			•	•	•	•
			fresa ø 2,0/2,4 L.11,5				•	•	•
			fresa ø 2,0/2,4 L.13					•	•
			fresa ø 2,0/2,4 L.16						•
			fresa ø 2,4/2,8 L.6	•					
			fresa ø 2,4/2,8 L.8		•	•	•	•	•
			fresa ø 2,4/2,8 L.10			•			
			fresa ø 2,4/2,8 L.11,5				•		
			fresa ø 2,4/2,8 L.13					•	•
			fresa ø 2,4/2,8 L.16						•
			fresa ø 2,8/3,3 L.6	•					
			fresa ø 2,8/3,3 L.8		•	•	•	•	•
			fresa ø 2,8/3,3 L.10			•			
			fresa ø 2,8/3,3 L.11,5				•		
			fresa ø 2,8/3,3 L.13					•	•
			fresa ø 2,8/3,3 L.16						•
			countersink ø 3,7	•	•	•	•	•	•
			maschiatore ø 3,7	•	•	•	•	•	•





IMPIANTI Ø 4,1

		altezza impianto (mm)					
		6	8	10	11,5	13	16
D1 D2-D3 D4	mucotomo CS	•	•	•	•	•	•
	bone profile BP	•	•	•	•	•	•
	fresa Ø 2,0/2,4 L.6	•	•	•	•	•	•
	fresa Ø 2,0/2,4 L.8		•	•	•	•	•
	fresa Ø 2,0/2,4 L.10			•	•	•	•
	fresa Ø 2,0/2,4 L.11,5				•	•	•
	fresa Ø 2,0/2,4 L.13					•	•
	fresa Ø 2,0/2,4 L.16						•
	fresa Ø 2,4/2,8 L.6	•					
	fresa Ø 2,4/2,8 L.8		•	•	•	•	•
	fresa Ø 2,4/2,8 L.10			•			
	fresa Ø 2,4/2,8 L.11,5				•		
	fresa Ø 2,4/2,8 L.13					•	•
	fresa Ø 2,4/2,8 L.16						•
	fresa Ø 2,8/3,3 L.6	•					
	fresa Ø 2,8/3,3 L.8		•	•	•	•	•
	fresa Ø 2,8/3,3 L.10			•			
	fresa Ø 2,8/3,3 L.11,5				•		
	fresa Ø 2,8/3,3 L.13					•	•
	fresa Ø 2,8/3,3 L.16						•
	fresa Ø 3,3/3,8 L.6	•					
	fresa Ø 3,3/3,8 L.8		•	•	•	•	•
	fresa Ø 3,3/3,8 L.10			•			
	fresa Ø 3,3/3,8 L.11,5				•		
	fresa Ø 3,3/3,8 L.13					•	•
	fresa Ø 3,3/3,8 L.16						•
	countersink Ø 4,1	•	•	•	•	•	•
	maschiatore Ø 4,1	•	•	•	•	•	•

IMPIANTI Ø 4,7

		altezza impianto (mm)					
		6	8	10	11,5	13	16
D1 D2-D3 D4	mucotomo CS	•	•	•	•	•	•
	bone profile BP	•	•	•	•	•	•
	fresa Ø 2,0/2,4 L.6	•	•	•	•	•	•
	fresa Ø 2,0/2,4 L.8		•	•	•	•	•
	fresa Ø 2,0/2,4 L.10			•	•	•	•
	fresa Ø 2,0/2,4 L.11,5				•	•	•
	fresa Ø 2,0/2,4 L.13					•	•
	fresa Ø 2,0/2,4 L.16						•
	fresa Ø 2,4/2,8 L.6	•					
	fresa Ø 2,4/2,8 L.8		•	•	•	•	•
	fresa Ø 2,4/2,8 L.10			•			
	fresa Ø 2,4/2,8 L.11,5				•		
	fresa Ø 2,4/2,8 L.13					•	•
	fresa Ø 2,4/2,8 L.16						•
	fresa Ø 2,8/3,3 L.6	•					
	fresa Ø 2,8/3,3 L.8		•	•	•	•	•
	fresa Ø 2,8/3,3 L.10			•			
	fresa Ø 2,8/3,3 L.11,5				•		
	fresa Ø 2,8/3,3 L.13					•	•
	fresa Ø 2,8/3,3 L.16						•
	fresa Ø 3,3/3,8 L.6	•					
	fresa Ø 3,3/3,8 L.8		•	•	•	•	•
	fresa Ø 3,3/3,8 L.10			•			
	fresa Ø 3,3/3,8 L.11,5				•		
	fresa Ø 3,3/3,8 L.13					•	•
	fresa Ø 3,3/3,8 L.16						•
	fresa Ø 3,8/4,4 L.6	•					
	fresa Ø 3,8/4,4 L.8		•	•	•	•	•
	fresa Ø 3,8/4,4 L.10			•			
	fresa Ø 3,8/4,4 L.11,5				•		
	fresa Ø 3,8/4,4 L.13					•	•
	fresa Ø 3,8/4,4 L.16						•
	countersink Ø 4,7	•	•	•	•	•	•
	maschiatore Ø 4,7	•	•	•	•	•	•